




**BIOPTRON®**   
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTROS

PORTUGUÊS (PT)

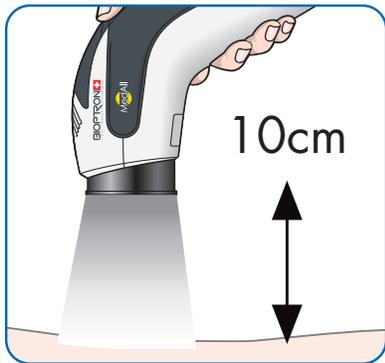

1



2



3



4

## COMO USAR?

A uma distância de 10 cm, posicione o dispositivo BIOPTRON com o filtro desejado para cobrir a área que pretende (Imagem 1) tratar. Ao tratar áreas maiores do que o diâmetro do filtro de cor, trate-as uma de cada vez tendo em conta o tempo recomendado.

## COMO MUDAR O FILTRO?

Com cuidado e sem fazer força, retire o filtro (Imagem 2) a ser substituído e insira o filtro da cor pretendida como indicado na Imagem 3. Segure no anel externo do filtro em vez da lente.

## COMO LIMPAR O FILTRO? (Imagem 4)

1. Retire o filtro do dispositivo segurando no anel exterior do filtro.
2. Utilize um pano suave, húmido e que não liberte fiapos para evitar arranhar a superfície de vidro.
3. Seque o filtro com um pano livre de fiapos diferente.

## GARANTIA:

- 5 anos se usado como destinado e se as advertências forem respeitadas
- Esta garantia cobre defeitos de material e de fabricação
- Esta garantia não cobre mudanças estéticas resultantes de desgaste que afetem o desempenho do produto, ou danos causados por uma má utilização do produto.

## ADVERTÊNCIAS

1. Não utilize quaisquer químicos (por exemplo álcool isopropílico) para limpar o lado interior ou exterior da superfície de vidro e do anel do filtro.
2. Guarde o filtro numa bolsa de proteção para prevenir a acumulação de pó e descoloração causada pela exposição à luz solar.
3. O filtro é feito de vidro frágil e deve ser manuseado com cuidado!
4. O utilizador não está autorizado a remover filtros da lente.



PMD-ME145-22-PT  
BIOPTRON FILTER IFU



**BIOPTRON AG**  
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND  
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



**WWW.BIOPTRON.COM**

PORTUGUÊS (PT)